

HMFvh 4011

Frigorifero per medicinali con raffreddamento a convezione
Perfection

FAVS
Scientific Equipment
Tel. 051501153
www.favs.it • info@favs.it



LIEBHERR

HMFvh 4011

Frigorifero per medicinali con
raffreddamento a convezione
Perfection




Accessori

708065000	Chiave di licenza SmartMonitoring da 36 mesi (online)
711330800	Griglia con rivestimento in plastica, colore bianco
711331200	Griglia inferiore con rivestimento in plastica, colore bianco


Volume lordo/utile	420/297 l
Dimensioni esterne in mm (L/P/A)	597/654/1884
Dimensioni interne in mm (L/P/A)	460/423/1660
Consumo energetico in 365 giorni	389 kWh
Temperatura ambiente	+10 °C a +35 °C
Dissipazione di calore	463
Gas refrigerante	R 600a
Rumorosità (potenza sonora)	49 dB(A)
Frequenza / tensione	50 Hz / 220-240 V~
Sistema di raffreddamento	dynamisch
Sbrinamento	automatisch
Intervallo di temperatura	+5 °C
Gradiente / Fluttuazione massima	3,0 °C / 2,4 °C
Materiale del corpo esterno/colore	Stahl/weiß
Materiale porta	Glas
Materiale contenitore interno	Kunststoff weiß
Tipo di comando	2,4"-Farbdisplay, Touch & Swipe
Allarme in caso di innalzamento della temperatura	optisch und akustisch
Allarme mancata alimentazione	unmittelbar bei Netzunterbrechung für mind. 12 h
Contatto a potenziale zero	si
Tipo di rete	SmartModule
Soluzione di rete	Integriert, entnehmbar
Interfaccia	WLAN/LAN
Registratore di dati	integriert, USB-Schnittstelle
Illuminazione interna	LED-Lichtsäule links, separat schaltbar
Griglie regolabili di appoggio	6
regolabili	5
Materiale griglie di appoggio	Roste kunststoffbeschichtet
Superficie griglie utilizzabile in mm (L / P)	460 / 423
Carico massimo griglie di appoggio	45 kg
Carico massimo complessivo	225 kg
Maniglia	Antimikrobieller Griff mit Öffnungsmechanik
Passante per sensore	1 x Ø 10
DIN 13277	si
Chiusura	elektronica, con controllo remoto
Battuta della porta	rechts wechselbar
Peso lordo/netto	87/83 kg
EAN-Nr.	9005382246399

Caratteristiche

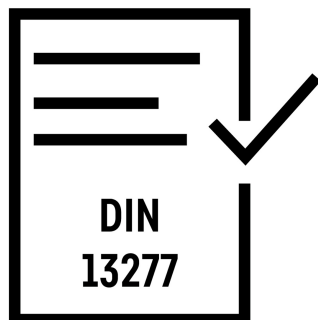

Conformità DIN 13277

I frigoriferi da farmacia e da laboratorio di Liebherr hanno tutte le caratteristiche e rispettano tutti i criteri di prestazione necessari per la conformità alla norma DIN 13277. La norma DIN 13277 definisce i requisiti e le specifiche di prova per frigoriferi e congelatori da laboratorio e per la conservazione di prodotti farmaceutici.

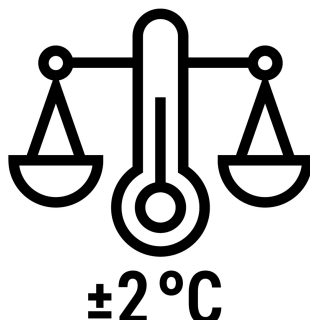

Stabilità della temperatura ±2 °C.

Per preservare la qualità delle sostanze sensibili è necessario limitare al massimo le fluttuazioni di temperatura. Le apparecchiature Liebherr garantiscono una fluttuazione massima dalla temperatura impostata di appena ±2 °C. Questo assicura condizioni di conservazione stabili e preserva la qualità dei prodotti conservati.




Massima efficienza

I frigoriferi e congelatori ad alta efficienza energetica ti aiutano a far fronte ai prezzi sempre più elevati dell'elettricità. Liebherr sfrutta appieno il potenziale di risparmio di ogni componente: dal compressore, alla guarnizione, fino all'illuminazione e all'elettronica. Le apparecchiature ultra-efficienti della serie Perfection, ad esempio, dimostrano come questo abbia un effetto positivo sui costi di gestione complessivi.



+2 °C SafetyDevice (limitatore di sicurezza)

Se la temperatura all'interno dell'apparecchiatura scende al di sotto di +2 °C a causa di un malfunzionamento, subentra la funzione +2 °C SafetyDevice (limitatore di sicurezza), che mantiene stabile la temperatura e attiva un allarme. Questa funzione impedisce alle sostanze sensibili di congelare e invia immediatamente una notifica.

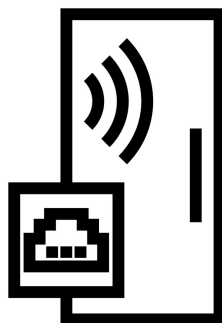

Interfaccia WiFi/LAN integrata


Connect and go: tramite l'interfaccia WiFi e LAN integrata è possibile collegare facilmente l'apparecchiatura a sistemi esterni come lo SmartMonitoring di Liebherr. Questa soluzione di monitoraggio digitale consente di controllare e registrare la temperatura di conservazione senza fatica e in modo agevole e sicuro.



Serratura elettronica con sistema di controllo a distanza

Le apparecchiature Liebherr possono essere protette da un codice PIN. È inoltre possibile bloccare e sbloccare l'apparecchiatura con un telecomando opzionale con ingresso digitale (ad esempio per l'integrazione di un timer). In questo modo i vari utenti possono bloccare e sbloccare una o più apparecchiature senza dover usare la stessa chiave.

Disegno tecnico

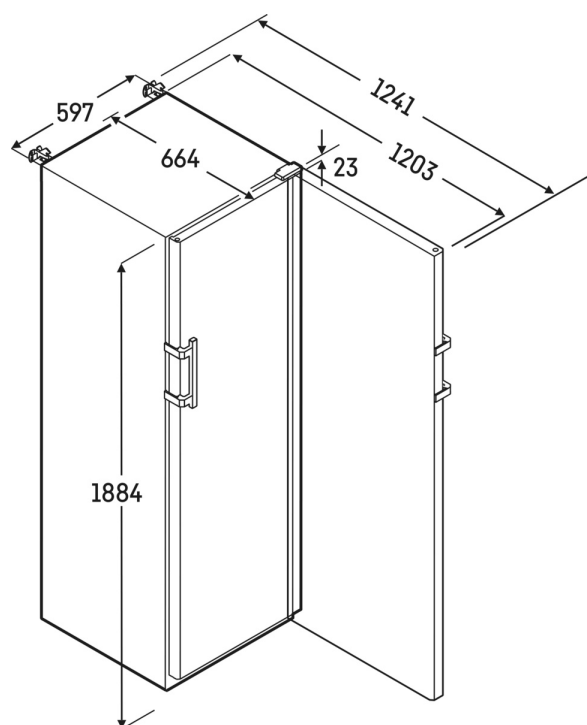

I prodotti e i loro dettagli sono presentati a scopo pubblicitario. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza di tutti i dati e le informazioni contenute in questo volantino, Liebherr si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Quando le dimensioni, le specifiche e le prestazioni effettive dell'apparecchio sono di fondamentale importanza, si consiglia di controllare le istruzioni di installazione che accompagnano l'apparecchio in questione. Liebherr non è responsabile per eventuali danni. (16.02.2024)

